

鉛筆式硬度計 手動型、下壓力可調


Pencil Scratch Hardness Tester **PPH-1000**

PREMA

台灣製

www.chuanhua.com.tw

- 可自行加掛荷重砝碼，調整筆尖荷重 500/750/1000g
- 只需將主機直立，將鉛筆插到底鎖定，即可達成水平
- 荷重砝碼均有重量標示蝕刻與防呆插銷，以避免錯放
- 滑輪採用同軸式設計，並外套膠圈，可防止打滑及偏向

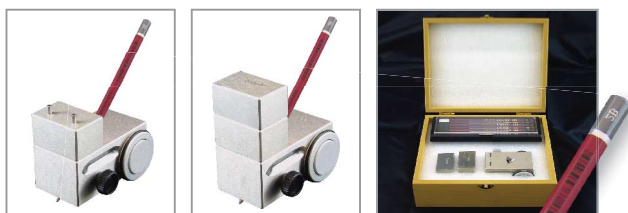

藉荷重砝碼的搭配，可改變不同的筆尖下壓力

規格	PPH-1000
測試鉛筆	標配JIS規格測試鉛筆(可選配DIN規格) 任選12支——6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H
筆尖荷重	鉛筆與測面夾角45°、筆尖荷重500/750/1000g
本體材質	全不鏽鋼
尺寸重量	90x50x90mm(LxWxH) 2.1Kg
符合標準	ASTM D3363, ISO 15184, BS 3900, NEN 5350, SIS 184187, SNV 37113, ECCA T4, MIL C 27 227
標準配件	日本三菱製JIS規格(日塗檢檢查濟)測試鉛筆12支 主機(500g)、砝碼(750g, 1000g) 400號砂紙、木質儲存盒
選購附件	DIN規格測試鉛筆、平頭削筆蕊機、平頭研磨器

可選購

專用平頭削筆蕊機
不是一般尖頭削鉛筆機！



硬度測試鉛筆、平頭削筆蕊機、平頭研磨器

最受歡迎的選購配件！鉛筆式硬度計最佳輔助利器！輕鬆處理每枝鉛筆，省時省力、標準一致！

主要有兩大系統：日本 JIS 及德國 DIN 規格。依筆蕊軟硬程度共有 17 種等級（由軟到硬）：6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H。台灣業界最常見的是日本三菱 (Mitsubishi) 製造之測試鉛筆，筆桿刻有「日塗檢檢查濟」字樣。



平頭削筆蕊機



平頭研磨器

鉛筆式硬度計 手動型

Pencil Scratch Hardness Tester **ZSH 2090**

ZEHTNER

瑞士製

www.zehntner.com

依據 Wolff Wilborn 規範，測量塗料表面硬度抗刮性，可應用於實驗分析或品質控制，油漆、塗料、家具、汽車烤漆 ... 單層、多層塗佈均適用，不需調整水平，測試快速簡便！

規格	ZSH 2090
測試鉛筆	標配DIN規格測試鉛筆(可選配JIS規格) 共17支——6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H
筆尖荷重	鉛筆與測面夾角45°、筆尖荷重7.5 N(735dynes)
本體材質	硬化處理不鏽鋼
尺寸重量	110x80x58mm(LxWxH) 2.1Kg(net)
符合標準	ASTM D3363, ISO 15184, EN 13523-4, NEN 5350, SIS 184187, SNV 37113, ECCA-T 4, MIL C 27 227
標準配件	DIN規格測試鉛筆17支、400號砂紙、儲存盒
選購附件	日本三菱製JIS規格(日塗檢檢查濟)測試鉛筆 平頭削筆蕊機、平頭研磨器



可選購

專用平頭削筆蕊機
不是一般尖頭削鉛筆機！

將硬度計直立，將鉛筆插到底鎖定，即可正確安裝測試鉛筆，不需調整水平

