


## 刮痕測試儀

Scratch Testers **705/706**

**SHEEN**

英國製

www.sheeninstruments.com

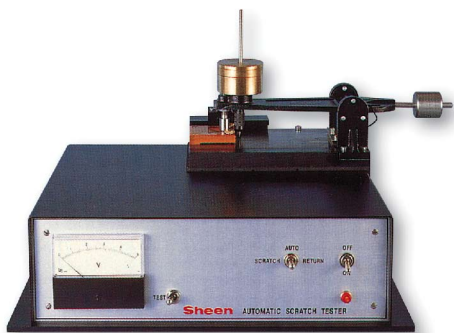

- 針尖固定，測試座定速前後運動，使樣品表面產生刮痕
- 您可選用單一重量砝碼，進行連續耐刮性測試；亦可逐漸增加重量，測試其表面處理被破壞時的最低荷重量

型號	符合規範	說明
705	BS3900:E2, ISO1518	電動型
705/1	ASTM D5178	
705/2	ASTM D2197	
706	BS3900:E2, ISO1518	手動型
Loop Stylus	BS3900:E17, ISO12137-1	U型刮頭


## 耐刷洗測試儀

Wet Abrasion Scrub Testers **903**

**SHEEN**

英國製

www.sheeninstruments.com

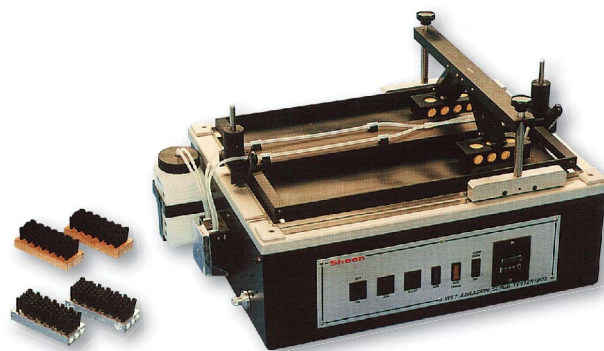

- 可固定 2 組毛刷或海棉測試，磨擦速率每分鐘  $37 \pm 1$  次
- 計數器可預設磨擦次數，蠕動泵浦準確控制液體分注量
- 適合油漆、顏料、塑膠、地板、裝潢材料、壁紙、傢俱、處理、皮革、清潔用品、清潔劑配方、金屬表面處理 ...

型號	說明	型號	說明
903	標準型主機	903/5	ASTM D4828-94
903/1	DIN53778 P+2	903/6	BS1248, EN12956
903/2	ASTM D2486-96	903/7	BS7719
903/4	ASTM D4213-96	903/8	BS3900, ISO11998
903/PG	清潔劑專用機種，具 4 組計數器、固定夾、海棉		

## 滑動式硬度計

Sward Type Hardness Rocker **703/704**

**SHEEN**

英國製

www.sheeninstruments.com



- Organic Coating 硬度是比較測試板上滑輪振盪次數而定
- 依玻璃板振盪次數為 100% 標準，結果以百分比 (%) 表示
- 測試檯腳座可調整水平，確保精確度
- 配備塑膠防風罩，避免讀值漂移
- 符合 ASTM D2134 標準規範

## BK 乾燥記錄器

BK Drying Recorder **BK3 | BK6 | BK10**

**SHEEN**

英國製

www.sheeninstruments.com



- 廣為各大造漆及塗佈業採用，鑑別乾燥過程的各階段變化
- 本體採用不鏽鋼與黃銅合金製成，避免鏽蝕，堅固耐用
- BK3 具有 6 支針頭固定器，可容納 6 組 12"x1" 玻璃測條，計時裝置可設定 3 種速率，測定時間 6...12、24 小時
- BK6 型具 6 組軌道、BK10 型具 10 組軌道，可設定不同啟動時間、往復次數、獨立 on/off 開關，標準測定時間 12 小時，可訂製 6、12、24、48 小時特殊規格
- 5g 銅製砝碼 (選購)，可提供針頭固定壓力