


塗佈棒 油漆、塗料測試必備

Coating Rods

JAF

美國製

www.chuanhua.com.tw

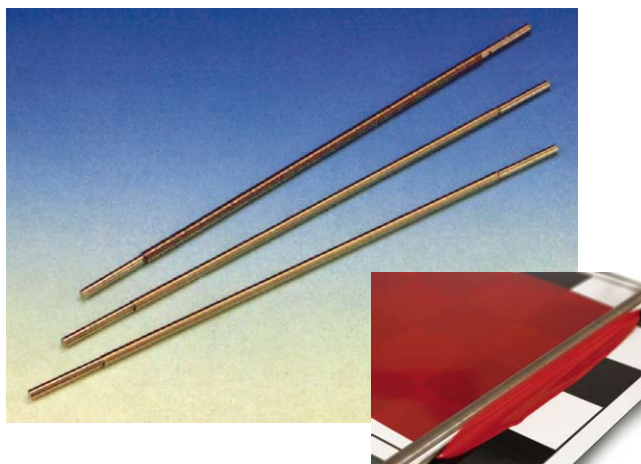

- 塗佈棒全長 400mm、可造濕膜寬度 300mm
- 直徑分為 Ø6.5mm、Ø12.5mm，訂購請註明
- * 2 號塗佈棒僅提供 Ø12.5mm 一種

info 可加購「塗佈棒支架」，詳請來電洽詢


| 編號 | 卷線徑 | 濕膜厚度 | 編號 | 卷線徑 | 濕膜厚度 |
|----|--------|---------|----|--------|----------|
| 2* | 0.05mm | 4.57µm | 28 | 0.71mm | 64.01µm |
| 3 | 0.08mm | 6.86µm | 30 | 0.76mm | 68.58µm |
| 4 | 0.10mm | 9.14µm | 32 | 0.81mm | 73.15µm |
| 5 | 0.13mm | 11.43µm | 34 | 0.86mm | 77.72µm |
| 6 | 0.15mm | 13.72µm | 36 | 0.91mm | 82.30µm |
| 7 | 0.18mm | 16.00µm | 38 | 0.97mm | 86.87µm |
| 8 | 0.20mm | 18.29µm | 40 | 1.02mm | 91.44µm |
| 9 | 0.23mm | 20.57µm | 42 | 1.07mm | 96.01µm |
| 10 | 0.25mm | 22.86µm | 44 | 1.12mm | 100.58µm |
| 12 | 0.30mm | 27.43µm | 46 | 1.17mm | 105.16µm |
| 14 | 0.36mm | 32.00µm | 48 | 1.22mm | 109.73µm |
| 16 | 0.41mm | 36.58µm | 50 | 1.27mm | 114.30µm |
| 18 | 0.46mm | 41.15µm | 55 | 1.40mm | 125.73µm |
| 20 | 0.51mm | 45.72µm | 60 | 1.52mm | 137.16µm |
| 22 | 0.56mm | 50.29µm | 65 | 1.65mm | 148.59µm |
| 24 | 0.61mm | 54.86µm | 70 | 1.78mm | 160.02µm |
| 26 | 0.66mm | 59.44µm | 75 | 1.91mm | 171.45µm |

落球式黏度計

Falling Ball Viscometer **KF10**

RHEOTEC

德國製

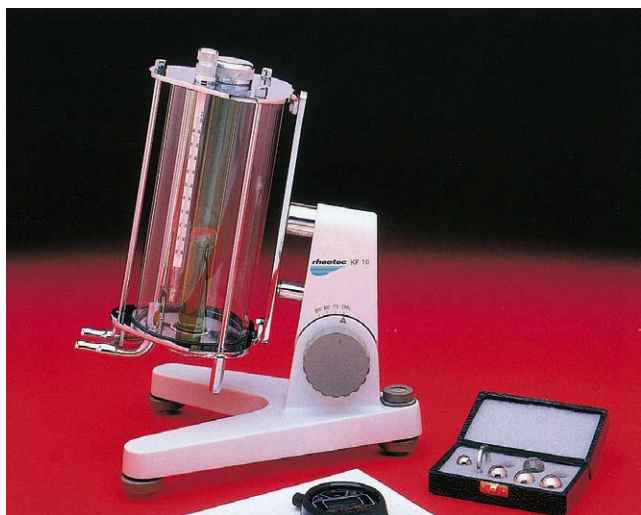

適合低黏度牛頓流體

- 石化業：石油、油脂、柴油、煤油、石蠟、碳氫化合物
- 化工學：化合物溶液、溶劑、樹脂溶液、乳膠、黏著劑
- 藥妝業：原料、甘油、乳劑、懸浮液、粹取物、化妝品
- 食品業：糖水、蜂蜜、啤酒、牛乳、果汁
- 造漆業：印刷油墨、墨水、油漆
- 造紙業：乳劑、塗料、添加劑
- 清潔用品：去污劑、清潔劑

使用簡單 高精密度

- 依據 Hoppelpler 原理，符合 DIN 53015 低黏度測試標準
- 透明管內測球移動清晰可見，增加精確度
- 操作簡單，可準確將測球歸位，縮短測試時間
- 黏度管密封於雙層玻璃管中，隔離外在環境干擾
- 更換不同測球 (#1...6 號)，即可改變測試範圍
- 選購特殊玻璃測球，可專門用來測量「氣體黏度」

| 規格 | KF 10 |
|-------|---|
| 黏度範圍 | 0.5...7 x10 ⁴ Pa.s |
| 精確度 | 0.5...2% (依不同測球而定) |
| 球體材質 | Balls #1/#2 硼硅酸鹽玻璃 Balls #3/#4 鍍鋼合金 Balls #5/#6 不鏽鋼 |
| 測球直徑 | Ø11.00...15.81mm (特殊測球Ø15.91mm) |
| 黏度管直徑 | Ø15.95mm (符合DIN 53015) |
| 測球移動 | 時間30...450秒、雙向距離100(50)mm |
| 工作角度 | DIN規範(垂直10%)、可調角度70°、60°、50° |
| 溫度範圍 | -60...150°C |
| 充填容量 | 40ml |
| 尺寸重量 | 180x220x330mm(WxHxL) 3.1Kg |