


磨擦試驗機 RCA

RCA Abrasion Wear Tester **7-IBB**

NORMAN

美國製

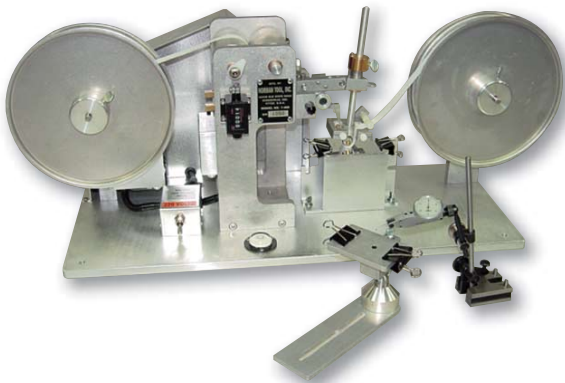

- 符合 ASTM F-2357-04 規範，在固定荷重狀態下，用標準紙帶、以固定循環次數摩擦樣品，評估其磨損狀況
- 一般測試紙帶：寬度 11/16"，每捲可測 1800 cycles
- 印刷測試紙帶：寬度 1/4"，每捲可測 1800 cycles
- 選購品：55/175/275g 荷重、計數器、計數停止器、斷紙停止器、RCA 紙帶 40 卷 / 箱、乾燥筒 10 卷 / 筒


info 詳細規格及選用附件，歡迎來電洽詢

印刷磨擦試驗機

RUB TESTER **SUTHERLAND 2000**

SUTHERLAND

美國製

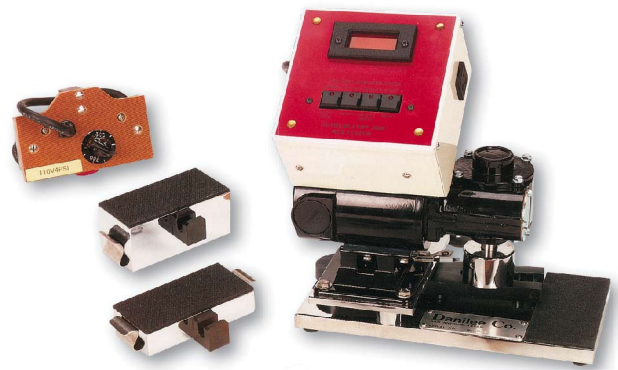

- 專門針對紙張、紙板的印刷油墨作耐磨度測試，亦可應用於測試清潔劑、蠟、地磚、磁磚、膜片之耐磨度，如：Dry Rub、Wet Rub、Web Bleed or Transfer、Wet Smear、Functional Rub。
- 若選購「加熱組件」，可在 95...260°C 不同溫度條件下，進行高溫耐磨擦試驗，再現性極佳！

info 詳細規格及選用附件，歡迎來電洽詢

胡佛式研磨機

Hoover Automatic Muller

HOOVER COLOR

美國製



- 1/2bhp 單向防爆馬達提供穩定轉速，搭配恆定壓力、精準研磨週期，在實驗室內即可快速製作出少量塗料樹脂樣本，重覆實驗的再現性高，提供一致的比對基礎
- 更換不同型式之玻璃盤、荷重砝碼、研磨週期、展色劑黏度、展色劑粒度、展色劑比例，即可改變分散率
- 可設定 1...99,999 次計數器，到達次數自動停止
- 符合 ASTM D332/D387、ISO 787-16 part.16/787-24 part.24 標準規範

耐磨耗試驗機

Abrasion Tester **P-228**

PREMA

台灣製

www.chuanhua.com.tw



原型號 Model 339

可選購
EF#74橡皮擦

- 適合塑膠、玻璃、陶瓷、漆膜、非導體塗層耐磨擦測定
- 金屬底材：鎂鋁合金、鋁合金鋼圈、板金業配電箱
- 非金屬底材：塑膠射出成型、手機外殼、筆記型電腦、事務機器、消費電子產品包裝、家電、汽車、PC 網板油墨
- 計數器 0-9999 次、行程 10-50mm、每分鐘 60 次可調
- 荷重砝碼 10g, 20g, 25g, 50g, 100g, 200g, 500g
- 可選購：人工汗水、測試酒精 (95° 乙醇)、測試紗布、橡皮擦規格 (EF #74 Pink for Pencil)、鋼絲絨磨頭