

Physical Properties Testing

輕量化快速篩分機

MINOR

Fast & Easy Sieving

ENDECOTTS

www.endecotts.com

英國製

Minor 承襲高階機種的優良功能，輕量化設計只有 17 公斤，便於攜帶搬運，機體完整堅固，適合各種工作使用。本體沒有任何機械活動部件，底座配有防振腳墊，確保運轉穩定性及肅靜性，無需額外保養，就能發揮最大功效。篩網固定器操作簡單，振動能量可被完整傳送至樣本，篩分迅速，再現性佳。定時器可設定 0...60 分鐘、或連續運作模式。



Physical Properties Testing

數位式高速篩分機

OCTAGON DIGITAL

High Performance Digital Shaker

ENDECOTTS

www.endecotts.com


英國製

OCTAGON DIGITAL 是實驗室及現場篩分之最佳利器！採用微電腦控制及電磁振盪驅動，沒有傳統篩分機的旋轉零件，運轉噪音低、無需保養即可發揮最大效能！OCTAGON DIGITAL 控制器以數字顯示，可設定處理時間與振幅大小，控制連續或間歇振動。特殊「高速垂直振動」使篩網中的樣本快速篩動，並可避免篩孔阻塞。抗振快速夾頭能牢固裝置篩網，改善金屬彈簧鬆緊不均的問題，更換快速方便。OCTAGON DIGITAL 完全符合 EC 安全認證。



OCTAGON DIGITAL 數位控制器

1. 開始/重設鍵
2. 電源燈
3. LED顯示幕
4. 運轉燈
5. 增加鍵
6. 減少鍵
7. 模式切換鍵
8. 連續、間歇震動開關

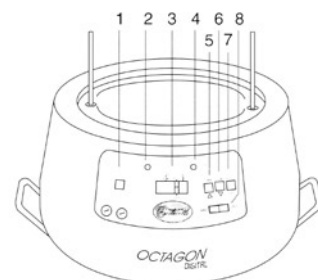

技術規格	
高度	180mm (不含篩網)
直徑	250mm
淨重	17Kg
定時器功能	0...60分鐘、連續操作
電源供應	110/230V 50/60Hz 60/80W
篩網規格	φ100/200mm、8"：全高型8個

技術規範	
全高	210mm (不含固定桿)
直徑	410mm
淨重	43Kg
電源供應	110/230V 50/60Hz 300W
篩網規格	φ200mm、φ8"：全高型8個、半高型18個