

Physical Properties Testing

高負載型快速篩分機

EFL 2000/1/2

Heavy Duty Shakers

ENDECOTTS


www.endecotts.com

英國製

EFL 2000 是針對大量散狀樣本所設計的高負載型機種。強力振動器可確實的將振量輸送至篩網，固定頻率的垂直運動，提高樣本通過篩孔的機率，減少懸滯所浪費的時間。篩分快速、準確、再現性高，篩孔不易阻塞。全新設計的抗振式夾頭，省卻傳統的金屬彈簧，可確保篩網牢固的裝置在振盪器上，更換與拆卸方便快速，兩種機型符合多種篩網規格。本系列完全符合 EC 安全認證。



運轉燈 電源燈 計時器 保險絲

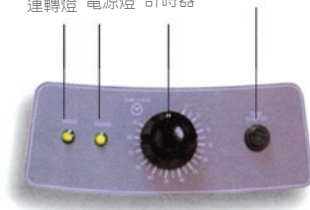

技術規範	EFL 2000/1
尺寸重量	510x330mm (WxH) (不含固定桿)、83Kg
電源供應	110/230V 50/60Hz 390/430W
篩網規格	φ200mm、φ8"：全高型8個、半高型18個

技術規範	EFL 2000/2
尺寸重量	510x330mm (WxH) (不含固定桿)、83Kg
電源供應	110/230V 50/60Hz 390/430W
篩網規格	φ300mm、φ12"：全高型6個、半高型12個 φ250mm、φ10"：全高型7個 φ200mm、φ8"：全高型12個、半高型24個

Physical Properties Testing

超重負載型快速篩分機

POWERMATIC

Heavy Duty Test Sieve Shaker

ENDECOTTS

www.endecotts.com

英國製

Powermatic 是針對大量樣本所設計，可承載直徑 450mm 篩網，2 顆以精確角度相對安裝的強力馬達，可將振動頻率完整傳送至樣本，特別是處理極輕的樣品時，避免一般振動器效能不佳或產生誤差之情形。特殊煞車在停機前自動啟動以避免系統超轉，堅固結構使運轉十分安靜。Powermatic 可裝置 5 組篩網、1 組盛盤及上蓋。分離式面板附延長線，可在桌面、牆壁、或其他位置進行操作，獨立安全斷電鎖確保裝卸設備的人身安全。



技術規範	
高度	385mm (不含固定桿)
寬度	580mm
深度	580mm
淨重	91.5Kg
電源供應	110/220V 50/60Hz 280/480W
篩網規格	φ350/400/450mm、18"：5個