

General Instrument

控制組件

Control-Unit SA


SA 型控制組件，包括一部個人電腦 (PC)、Windows 相容專用軟體，是專為 OSMOMAT 070/090 所設計。提供完整的操作、測量、監控界面，在整個測量過程中，以文字或圖形指引使用者完成各項設定，並提供詳細的統計評估報告，包括各項參數及讀值加總、曲線圖表，所有分析結果皆可列印出來。

技術規範	
儲存測值	可預設時間自動儲存
漂移補償	自動補償
統計計算	自動計算線形迴歸，消除讀數之偏差
繪圖功能	在螢幕以x-t軸顯示測量結果、或以迴歸線形表示
列印輸出	可輸出圖形與文字 (印表機為選購)

GONOTEC

www.gonotec.com

德國製

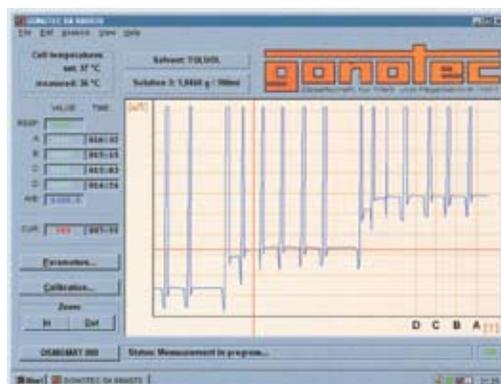

General Instrument

控制組件

Control-Unit B

B 型控制組件是針對測定分子量所設計，具備完整操作、測量、監控功能。所有參數從面板按鍵即可完成設定，4 位數 LED 顯示實際測量讀數或槽內溫度。本機具有類比訊號輸出端子，可外接電壓式記錄裝置 (Potentiometric Recorder)。

技術規範	
類比輸出	1V for full deflection (建議感度)
電源供應	110/230V 50/60Hz
尺寸重量	260x320x110mm、3.5Kg

GONOTEC

www.gonotec.com

德國製

