

電磁加熱攪拌機

Magnetic Stirrers with Heating C-MAG HS/HP | RET | RCT | RT | ETS

IKA

www.ika.net

德國



C-MAG HS7
電磁加熱攪拌機

C-MAG HP10
數位式加熱板

C-MAG HS7/10 反饋型電磁加熱攪拌器 C-MAG HP7/10 數位式加熱板

- 無接縫陶瓷玻璃面板，高抗化學品腐蝕性。盤面尺寸 HS7/HP7 200x200mm、HS10/HP10 280x280mm
- C-MAG HS7/10 攪拌馬達具反饋機能 (100-1500rpm)，確保轉速維持恆定。最高攪拌力 10L(HS7)、15L(HS10)
- LED 數字精確設定加熱溫度 (500°C max.)，具 550°C 安全斷電迴路，盤面高溫警示，可選配 ETS 精密溫控器



RT 5 power




RT 10 power



RT 15 power

RT 5/10/15 power 多點電磁加熱攪拌器

- 5 點、10 點、15 點三款機型，每點間距 90mm
- 0-1100rpm 多點攪拌、每點最高攪拌量 400ml
- 多點同時加熱，每點盤面溫度可達 120°C max.
- 雙刻度旋鈕，專利 EC 轉速穩定 / 精密溫控迴路

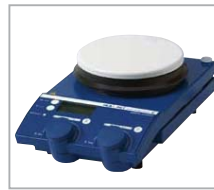

RET control-visc C
另有抗化學品腐蝕能力的
白色盤面機種



RET control-visc 溫控型電磁加熱攪拌器

- 內建微電腦溫度控制器，可選配 1 支 Pt100 探棒精確控制溫度、或選配 2 支 Pt1000 探棒監測熱傳導液溫度變化
- 具 2 組 50-350°C 安全迴路、高溫警示、攪拌子破損偵測
- LCD 背光顯示轉速 (0-1500rpm)、溫度 (340°C max)
- RS232 可連結電腦，輸出轉速、溫度、相對黏度
- 選擇加熱及攪拌鎖定模式，可防止被任意調整
- 鋁合金加熱盤 Ø135mm、最高攪拌量 20L



ETS-D5 溫度控制器
-50-450°C、解析度
0.1K、精確度 ±0.2K、
PID 電子溫控、Pt1000
不鏽鋼探棒



ETS-D6 精密溫度控制器
-50-450°C/0-14pH、
解析度 0.01K/0.01pH、
精確度 ±0.05K、PID 溫
控、超大液晶、Pt1000
不鏽鋼探棒、可選配
pH 電極同步顯示



RCT basic safety control 溫控型電磁加熱攪拌器

- 內建溫度控制器，標配 Pt1000 探棒可精確控制溫度
- LED 顯示轉速 (50-1200rpm)、溫度 (310°C max)，具 50-360°C 安全迴路、高溫警示、可選配 ETS 精密溫控器
- 人體工學雙旋鈕操作面板，堅固耐用、工作壽命長
- 鋁合金加熱盤 Ø135mm、最高攪拌量 20L


電磁攪拌機

IKA

德國

Magnetic Stirrers C-MAG MS | Color/Big Squid | Lab Disc | TOPOLINO | RO

www.ika.net

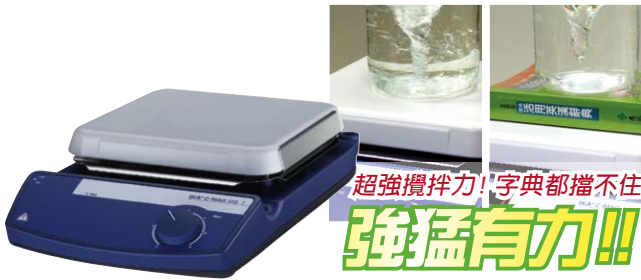

C-MAG MS7
電磁攪拌機



C-MAG MS4
電磁攪拌機

C-MAG MS4/7 電磁攪拌機

- 無接縫陶瓷玻璃面板，高抗化學品腐蝕性。盤面尺寸 MS4 120x120mm、MS7 200x200mm
- 超強吸附磁力，可避免攪拌子飛脫，強力馬達具反饋機能 (100-1500rpm)，確保轉速恆定、提升攪拌效能，最高攪拌力 MS4 5L、MS7 10L
- 前傾式加高面板操作方便，導流槽可將溢出液體排流至兩側下方，防止污染面板，清潔保養容易



RO 5 power



RO 10 power



RO 15 power

RO 5/10/15 power 多點電磁攪拌器

- 5 點、10 點、15 點三款機型，每點間距 90mm
- 0-1100rpm 多點攪拌、每點最高攪拌量 400ml
- 旋鈕式 0-10 轉速調整、專利 EC 轉速穩定迴路
- 不鏽鋼製外殼、抗腐蝕性液體侵蝕、清潔容易



Color Squid



Big Squid

Color Squid 電磁攪拌器 | 彩色小烏賊 Big Squid 電磁攪拌器 | 彩色大烏賊

- Color Squid 盤面 Ø110mm、最高攪拌力 800ml
- Big Squid 盤面 Ø160mm、最高攪拌力 1500ml
- 強化玻璃盤面材質，具良好耐酸鹼、抗侵蝕能力
- 最高轉速 1500rpm，多種彩繪圖案，任您挑選
- 專利 EC 轉速穩定控制迴路，具無段調整功能



Topolino



lab disc

Topolino 迷你型電磁攪拌器 lab disc 防爆型電磁攪拌器 | 超薄 12mm

- Topolino 採用無碳刷馬達、轉速 300-1800rpm 無段可調、最高攪拌力 250ml、PP 材質盤面 Ø80mm
- lab disc 採用超薄電磁線圈、無旋轉部件，盤面 Ø90mm。可每 30 秒自動反轉，攪拌效果更佳。面板外殼皆抗化學品腐蝕、具防滑安全腳墊。符合 2 級防爆、IP65 防塵防水