


平行板黏度計

Spread Meter **No.419**

RIGO

日本製

日本離合社製，可測量不透明樣品（如：印刷油墨、軟膏）之黏度。每次只需 0.5cc，測畢可拆解以溶劑清洗，使用方便。

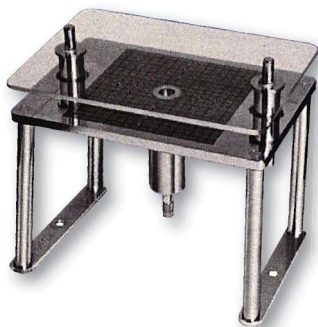

規格	No. 419
測定範圍	1,000...100,000 cP、精確度約5% @常溫
所需樣品	0.5cc

油漆黏度計 數字顯示KU/cP

Kerbs Unit Viscometer **KU-2**

BROOKFIELD

美國製

- 符合標準 ASTM D562 規範
- 免砝碼、無滑輪、操作簡單！只要拉起把手即可鎖定讀值
- 測量範圍 40...141 KU, 27...5274 cP, 32...1099 g
- 顯示解析度 0.1KU/1cP/1g、精確度 ±1%
- 可外接印表機（Parallel），可自定列印數據格式



選購附件	
空氣循環裝置	測量揮發性溶劑時使用
Paste轉子	適合黏度極高的樣品
恆溫水槽	需保持恆溫、或在不同溫度下測量
印表機	可輸出自定格式之測值報告

錐板式黏度計

ICI Cone & Plate

RESEARCH

英國製

www.research-equipment.com



- 符合 BS、ASTM、ISO 多種標準規範
- 多段轉速可調，適應不同剪切力條件
- 適合油漆、顏料、合成樹脂、塑膠業
- 少量樣品，60 秒內可快速完成測量
- 內建恆溫裝置，可在不同溫度下測試
- 可搭配「標準黏度液」進行精確校正

迴轉式黏度計 攜帶型、桌上型

Viscometer

TOKI SANGYO

日本製

www.tokisangyo.co.jp



- 高亮度 LED 數字顯示，讀值清晰
- 使用 4 顆鹼性電池，免外接電源
- 手提式設計、可直接在現場測定
- 單位可切換 mPa.s、Pa.s、%
- 讀值與 B-type 黏度計完全相容
- 選購：轉子、腳架、電源供應器



- 無接點磁性軸承，耐久度零故障
- 數字顯示讀值，螢幕具背光照明
- 「快拆式轉子夾頭」更換最方便
- 「自動停止機能」節省等待時間
- 具零點校正、斜率修正、單位切換
- 多種機型選擇，測量範圍極為廣泛