

融點測定器


Melting Point Apparatus **SMP30**

STUART

www.bibby-scientific.com

英國

SMP30 可同時放置 3 組樣本，內建精密白金溫度感應器，任意輸入起動溫度與加熱速率（每分鐘 0.5...10°C 可調），大型液晶螢幕顯示實際溫度與加熱狀態。高倍放大鏡內藏光源，清楚觀察樣本融解過程，內建即時顯示溫度 HUD，數據可儲存於隨機記憶體中。加熱完畢，可在 12 分鐘內迅速冷卻至室溫，即可進行下次實驗，節省寶貴時間。

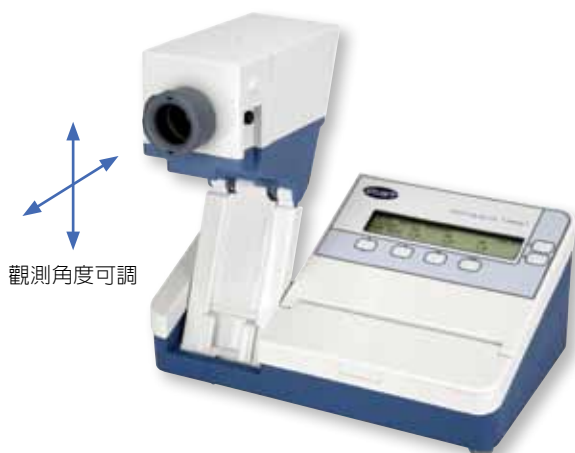

觀測角度可調



可同時觀測三組樣本，內建 HUD(Head Up Display)抬頭顯示器，無需移開視線，即可讀取溫度值，不致錯失樣本變化關鍵時刻。為取得最舒適觀察角度，支臂可前後、上下調整至最佳位置，使用完畢還可收折起來。免工具、無旋鈕，用手移動至定位放開，立即自動固定。加熱區可打開清潔，維護十分方便！

凝集試驗機

Flocculators **SW6 | SW5**

STUART

www.bibby-scientific.com

英國

數位式攪拌具反饋機能，可設定 2 組預設值，能精確重現實驗條件，模擬完全相同之狀態。底部照明光源分佈均勻，黑色消光屏幕襯底，實驗結果一目了然。SW6 可容納 6 組樣本，SW5 可容納 2 組樣本，頂部提把方便您攜帶使用。



SW6



SW5

型號	SMP30
樣本數量	3組
加熱溫度	室溫...400°C
溫度解析度	0.1°C
溫度精確度	±0.5°C @ 20°C, ±1.5°C @ 360°C
升降溫時間	50-350°C <6min, 350-50°C <12min
顯示螢幕	LED數位式HUD溫度顯示器 LCD數位式螢幕、40字元x4行
加熱速率	每分鐘0.5...10°C、調整精度0.1°C
溫度感應器	Pt100 白金製
記憶體	每件樣本可儲存8組數據
電源供應	110/230V 50/60Hz 60W
尺寸重量	325x200x170mm 3.6Kg

型號	SW6	SW5
樣本數量	6組	2組
旋轉速度	12...240rpm	12...240rpm
預設轉速	2組可調	2組可調
轉速顯示	LED數位式	LCD數位式
電源供應	110/230V 50/60Hz 200W	110/230V 50/60Hz 100W
尺寸重量	750x210x460mm 17.5Kg	320x210x500mm 8.6Kg

天平
衡器

理化儀器

黏度分析

色彩色差

攪拌均質

光學儀器

光學特性

恆溫設備

塗料檢測

物性試驗

紡織專區

紙業專區