

樣本裁切器

Laboratory Sample Cutter **ALFA 240-7B | 240-10**

輕鬆製作統一規格試樣

ALFA 裁切器可更換多種形狀刀模，切割出尺寸一致的片狀試樣，適合紙張、紙板、塑膠、紡織品、橡膠、不織布 等。

240-7B 採氣動式作業，可快速切割各種試樣，如：衛生紙、輕薄的不織布、塑膠模、橡膠模、較厚紙張、紙板、鋁箔，三面開口設計，適合處理大尺寸樣本。


240-10 採電磁液壓式驅動，可產生 8 噸下壓力，是處理厚重樣品的理想工具。240-10 具備安全保護設計，雙手離開檯面後同時按壓左右按鈕才開始切割，保障作業人員安全。

規格	240-7B	240-10
驅動方式	氣動式	電磁液壓驅動式
切割尺寸	10"x10" 254X254mm	12"x12" 305x305mm
線性長度	48" 1219.2mm	48" 1219.2mm
尺寸	305x330x483mm	736x394x584mm
淨重	113Kg	135Kg
壓縮空氣	80-110psi (無凝結)	--
電源供應	--	115/220V 50/60Hz

THWING-ALBERT

www.thwingalbert.com

美國

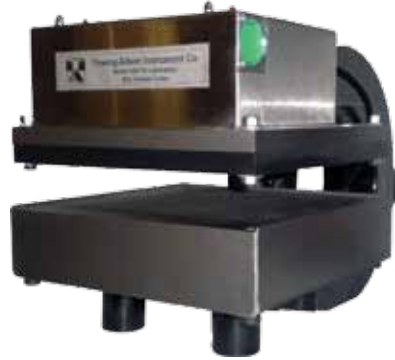

ALFA 240-7B



ALFA 240-10

樣本裁切器 精密型

Precision Sample Cutter **JDC**

全球廣泛認可的標準裁切器

JDC 可快速裁切寬度相等、完全平行的樣本切條。只要一個動作，銳利的雙刀片與精密底座裁刀同時切斷樣品，迅速準確。刀具是以特殊工具鋼製造，經冷熱循環硬化處理，確保長時間鋒利度，避免磨損或變形。

JDC 可處理紙張、紙板、金屬箔片、不織布、薄膜、衛生紙、各種材料。鑄造底座提高穩定性，可選配安全滑蓋，確保操作安全。

規格	樣本尺寸	規格	樣本尺寸
JDC-.5-10	0.5"x10"	JDC-25M-10	25mmx10"
JDC-1-10	1"x10"	JDC-50M-10	50mmx10"
JDC-3-10	3"x10"	JDC-1-12	1"x12"
JDC-15M-10	15mmx10"	JDC-1-16	1"x16"
平行誤差			±0.001"
切割寬度			1/8"...3" (3...76mm)
切割長度			10"、12"、16" (254...406mm)
選購配備	滑動式護蓋、可更換研磨刀片與底座裁刀		

THWING-ALBERT

www.thwingalbert.com

美國



天平衡器

電氣化學

黏度分析

色彩色差

攪拌均質

光學儀器

光學特性

恆溫設備

塗料檢測

物性試驗

紡織專區

紙業專區