

A.B.D.粉体特性測定器

ABD-100 型



安息角.....

デジタル角度計により、測定が簡単にできます。(安息角、崩壊角)

かさ密度.....

タッピングの回数をデジタルで設定でき、手間が省けます。
 疎充填かさ密度、密充填かさ密度から圧縮度を求めます。

分散度.....


分散度測定を別にするにより、試料皿上のサンプルの重量を電子天秤で直接測れます。



筒井理化学器械株式会社

仕様

- ・ 電源……100V・50VA・50/60Hz
- ・ 重量……各 20kg
- ・ 角度計……0.1 度(分解能)
- ・ 電子天秤……0.1g(分解能)

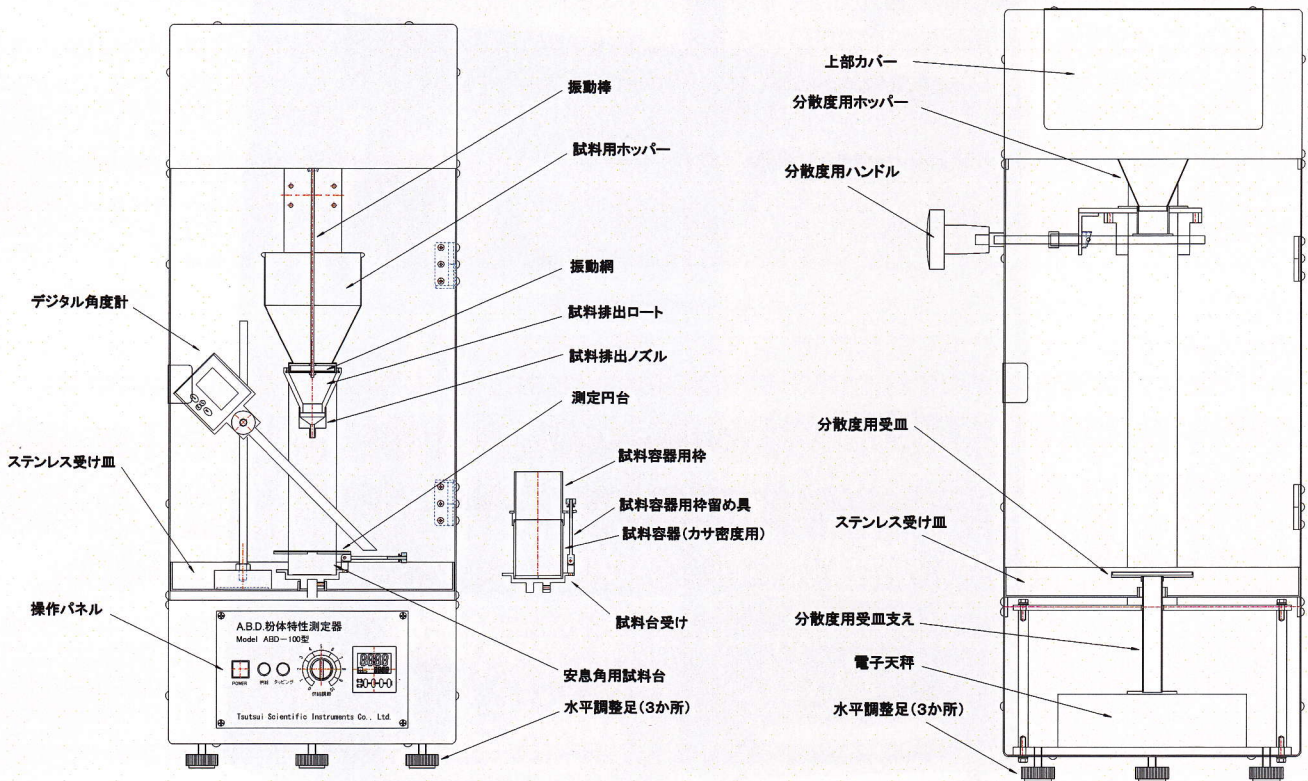

本体外観図

付属品

取扱説明書による

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31
TEL 03(3845)2011(代) FAX 03(3842)5852

E-mail sales@e-tsutsui.com

URL <http://www.e-tsutsui.com>