

濕膜塗佈機 可自定速度及長度

Automatic Film Applicator Coater **ZAA 2300**

新品

ZEHNTNER

www.zehntner.com

瑞士製



各式塗佈棒及規格，請見第 26 頁



塗佈長度、寬度、速度可任意自行調整！
最大可造濕膜寬度300mm(視塗佈器而定)

- 符合標準 ASTM D823-95，適合實驗、品管分析、油漆、塗料、油墨、亮光漆、黏著劑之分佈特性
- 可任意調整塗佈長度（起點 / 終點）、及移動速度
- 可同時使用多組濕膜塗佈器、起點夾具可任意移動
- 底板具橡膠、玻璃雙面材質，適合各種特性之試樣
- 塗佈棒固定器提供穩定下壓力，非一般只固定兩端
- 選購「真空吸板」可固定質地輕薄試樣，穩定吸附

規格	ZAA 2300	ZAA 2300.F	ZAA 2300.FF
塗佈速度	1...99 mm/sec	1...250 mm/sec	1...500 mm/sec
塗佈面積	400x300mm(LxW) max. (可調式)		
塗佈底板	橡膠、塗佈專用特殊玻璃(雙面可交替使用)		
本體材質	陽極處理鋁合金		
電源供應	100...230V 50/60Hz		
尺寸重量	565x382x190mm 26.4Kg		


可調式濕膜塗佈器 0...3000µm可調

Universal Applicator **ZUA 2000**

ZEHNTNER

www.zehntner.com

瑞士製

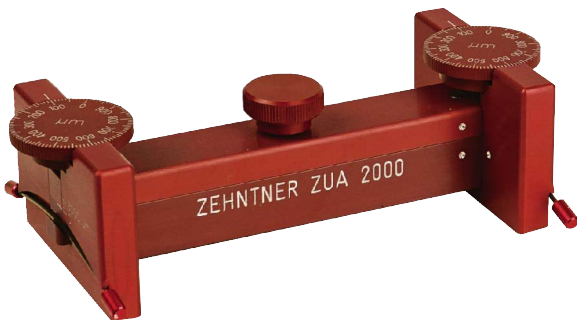

塗料特性會依厚度而改變，在研究分析時，必須以標準厚度塗佈試樣，才能維持公平性與一致性。ZUA 2000 以陽極處理鋁合金製作，不脫色、耐酸鹼、抗腐蝕，能精確設定 0...3000µm 濕膜厚度，並可完全拆解，以溶劑清洗。

規格	ZUA 2000
濕膜厚度	0...3000µm* (可調式)
濕膜寬度	60, 80, 100, 150mm, 200...400mm接受訂製
最小刻度	5µm
本體材質	陽極處理鋁合金

* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度

垂流試驗器

Sagging Applicator **ZLA 2130**

ZEHNTNER

www.zehntner.com

瑞士製

依 DIN 55766 標準規範，以「目視法」即可評測垂流度。ZLA 2130 塗佈器以 25µm 增量，在底材同時產生 10 條濕膜（由薄到厚）。將底材豎起、觀察垂流狀況，第 1 條不與下方濕膜相交的厚度即為「垂流度指數」。



標準型

訂製型

規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZLA 2130.50	50/75/100/125/150/175/200 225/250/275µm	100mm
ZLA 2130.250	250/275/300/325/350/375 400/425/450/475µm	100mm
ZLA 2130.450	450/475/500/252/550/575 600/625/650/675µm	100mm
ZLA 2130.S1	特殊厚度接受訂製	100mm
ZLA 2130.S2	特殊厚度接受訂製	接受訂製
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度